

Automatisierung

intelliPATH FLX™ und NxGEN DC-Modul




Das perfekte Team für Ihre Immunhistochemie: intelliPATH FLX™ und NxGEN DC-Modul



► intelliPATH FLX™
Immunfärbesystem

► ZUVERLÄSSIG – OFFEN – FLEXIBEL

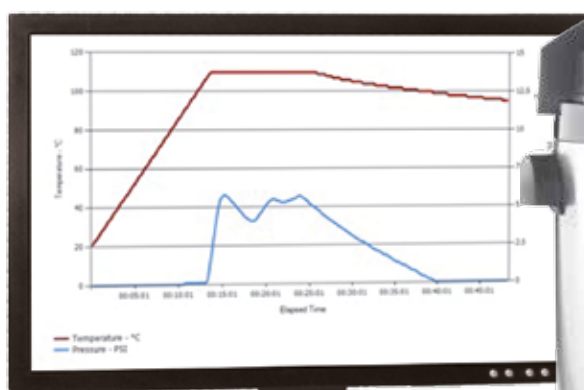

► NxGEN DC-Modul
Vorbehandlung



► STANDARDISIERT – DOKUMENTIERT

Automatisierung

intelliPATH FLX™ und NxGEN DC-Modul

NxGen DC-Modul – Standardisierte und dokumentierte Vorbehandlung für Ihre Immunhistochemie

1 h



- ▶ Komplette Entparaffinierung und Vorbehandlung in weniger als einer Stunde
- ▶ 72 Schnitte Kapazität (3 Küvetten à 24 Objektträger)
- ▶ Aufzeichnung der Vorbehandlungsdaten (Datum, Laufzeit, Temperatur- und Druckverlauf), speicherbar über USB-Anschluss
- ▶ Geringer Platzbedarf (H: 36 cm, B: 34 cm, T: 33 cm)
- ▶ Protokolle im Temperaturbereich von 60°C – 110°C
- ▶ Schnellstart mit Einstellungen des letzten Laufes


intelliPATH FLX™ Immunfärbesystem: ZUVERLÄSSIG – OFFEN – FLEXIBEL

2,5 h



- ▶ brillante und reproduzierbare Färberegebnisse
- ▶ offenes System
- ▶ Objektträger und Reagenzien mit Barcodierung
- ▶ 50 Schnitte Kapazität
- ▶ Dauer eines Färbelaufs: 2,5 Stunden*
- ▶ Nachlademöglichkeit
- ▶ einfache Bedienung
- ▶ flexible Protokolle (z.B. Doppelfärbung, Detektion von CISH Sonden)
- ▶ 48 Reagenzienplätze
- ▶ 2 gekühlte Reagenzienplätze
- ▶ automatisches Mischen von Reagenzien wie z.B. Chromogen
- ▶ schnelle Überprüfung der Reagenzien mit Ultraschallmessung
- ▶ sichere Kontrolle der Füllstände der Pufferkanister mit Sensoren
- ▶ Abfalltrennung
- ▶ vielfältige Report-Möglichkeiten wie Schnittzahl, Reagenzienverbrauch
- ▶ Geringer Platzbedarf (H: 61 cm, B: 102 cm, T: 64 cm)
- ▶ CE/IVD
- ▶ Gerät komplett mit Rechner, Monitor, Tastatur, Maus, 2 Etikettendruckern, Drucker, USV

*mit Standardprotokoll

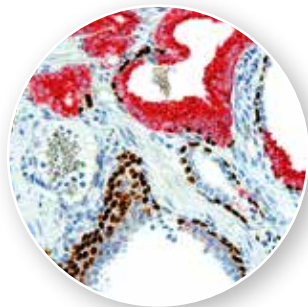

Ihre Vorteile bei Zytomed Systems:

Wir unterstützen Sie bei Einarbeitung und Betrieb der Geräte

- ▶ mit kompetenten Außendienstmitarbeitern und Applikationsspezialisten vor Ort
- ▶ mit dem erfahrenen Team des Zytomed Systems eigenen IHC-Labors
- ▶ mit dem exzellenten Zytomed Systems Geräteservice

Möchten Sie mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen zum intelliPATH FLX™ und zum NxGen DC-Modul unter info@zytomed-systems.de oder telefonisch unter **+49 30 804 984 990!**